
E-PERVET

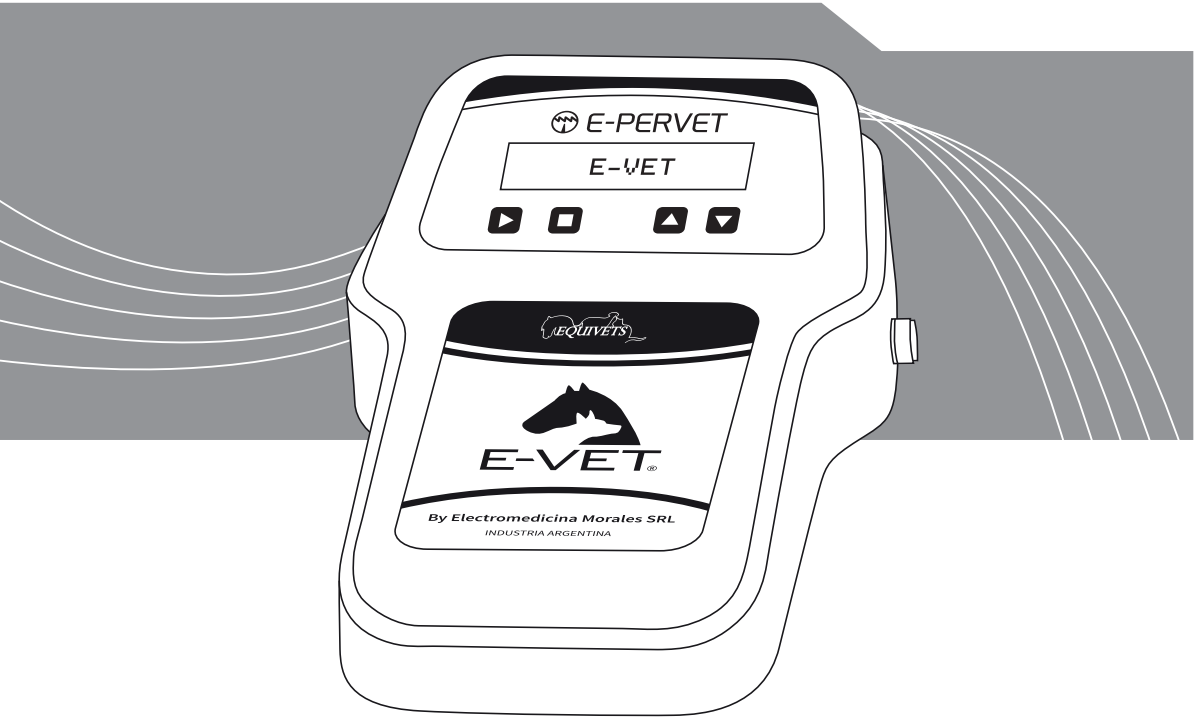

Electrólisis Percutánea

E-VET®
By Electromedicina Morales SRL

ÍNDICE

PÁG.	SECCIÓN
3	**01** » EMPRESA
4	**02** » INTRODUCCIÓN
5	**03** » EFECTOS / BENEFICIOS
6	**04** » EQUIPO
7	**05** » USO
12	**06** » TRATAMIENTO
12	**07** » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
12	**08** » CONTRAINDICACIONES
13	**09** » ADVERTENCIAS
13	**10** » ACCESORIOS
14	**11** » DATOS TÉCNICOS
15	**12** » SIMBOLOGÍA
15	**13** » CONTROL DE ENTREGA
16	**14** » GARANTÍA
17	**15** » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO
18	**16** » NOTAS

01 » EMPRESA

Desde 1981, época en que **ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.®** se inicia en el mercado de la medicina estética, fabricando su primer producto, el depilador por radiofrecuencia, y muy pronto vería la luz un segundo equipo, el ionto-contractor,de un avanzado diseño para la época, le permitiría introducirse definitivamente en el mercado de la belleza profesional siguiendo en camino con el desarrollo de aparatología para profesionales.

Dirigidos a kinesiólogos, médicos, cosmiatras, esteticistas, cosmetólogas y profesionales de la belleza en general, **ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.®** continua desarrollando equipos de alta calidad, de la mano de los últimos avances tecnológicos.

Desde entonces, **ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.®** sigue creciendo en estructura, recursos humanos y confiabilidad de sus productos, consolidándose como empresa de producción de equipamiento para kinesiología y estética.

Siempre manteniendo su **VISION, LIDERAZGO y CALIDAD,** como base la tecnología, innovación y postventa.

Nuestra Misión.

Nuestra misión es el diseño, fabricación, comercialización y la asistencia técnica post-venta para equipamiento electromédico, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y usuarios en el tratamiento integral de la estética corporal, kinesiología, cosmética y las actividades de asesoramiento y capacitación que permiten maximizar las prestaciones de nuestros productos.

Nuestra Visión.

Ser reconocidos entre nuestros clientes, usuarios y distribuidores por nuestra calidad de atención, la de nuestros servicios de asesoramiento y capacitación y sobre todo, por la calidad de nuestros productos, servicio post-venta y asistencia técnica.
Por todo lo expuesto, es que nos esforzamos en forma permanente para cumplir con nuestros objetivos.

Nuestra Política de Calidad.

Nuestra misión y visión solo pueden ser tangibles mediante el compromiso de la Dirección General con los siguientes valores fundamentales, los cuales son comunicados y se consideran los cimientos para la construcción de nuestra organización:

- Nos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes comunicando nuestros objetivos a todo el personal y brindando los recursos necesarios para que la calidad de nuestros productos y servicios sea una consecuencia de la calidad de gestión de nuestros procesos.

- Nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios y cualquier requisito, aún aquellos no especificados pero necesarios para la seguridad y eficacia de nuestros productos.

- Nos comprometemos con la participación del personal, entendiendo que los Recursos Humanos son nuestro capital más importante y que la capacitación y la evaluación de su desempeño es la mejor inversión para el crecimiento de este capital.

- Nos comprometemos a evaluar a nuestros principales proveedores para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, promover el compromiso y la participación y encontrar oportunidades de mejora.

- Nos comprometemos a mantener y mejorar la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad, mediante el establecimiento y seguimiento de indicadores que nos permitan verificar el cumplimiento de nuestros objetivos sin descuidar la rentabilidad de nuestra empresa.

- Nos comprometemos a comunicar, implementar y asegurar que esta Política es comprendida por toda la organización y a que la información que suministre nuestro sistema de gestión sea la herramienta de análisis para su continua adecuación.

02 » INTRODUCCIÓN

La Electrólisis percutánea intratisular (EPI) es la técnica de fisioterapia invasiva más novedosa en medicina veterinaria. Fue creada en el año 2002 en España, por el Lic. en Fisioterapia, José Manuel Sánchez Ibáñez, y consiste en una serie de cambios biológicos, mecánicos, biomecánicos y funcionales en un tejido músculo-esquelético a través del paso de una corriente eléctrica continua.


Esta técnica, consiste en la aplicación ecoguiada de una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura que produce un proceso inflamatorio de carácter local permitiendo la fagocitosis y la reparación del tejido blando afectado (tendón, ligamento, músculo, etc.).
El pasaje de corriente produce una reacción mecánica, electroquímica y electrofísica.

La reacción electroquímica incluye la disociación de partículas, tanto de H20 como de cloruro de sodio (ClNa), y la reorganización de moléculas que conlleva a la formación de nuevas sustancias como Hidroxido de sodio (NaOH), responsables de la licuefacción tisular con liberación de gas hidrógeno (H2).
Por otro lado, la reacción electrofísica, produce la migración de moléculas cargadas eléctricamente hacia los polos opuestos, activación de mecanismos analgésicos y respuestas vasculares.

E-PERVET está diseñado para emitir una determinada corriente, la cual cuenta de 3 partes: una rampa de ascenso, una meseta o tiempo efectivo y una rampa de descenso para luego finalizar.
Se utilizan rampas de ascenso y de descenso para que el tratamiento sea más confortable para el paciente.


1ra parte: Rampa de ascenso, inicia con una corriente mínima de 300µA, esta corriente inicial está diseñada para producir un efecto bactericida y de asepsia al ingresar la aguja al paciente. En la cual se puede configurar su intensidad máxima y su tiempo.

Por ejemplo: Establezco la intensidad mínima en 300µA, la intensidad máxima en 4020µA y el tiempo de ascenso de la rampa en 7 segundos.

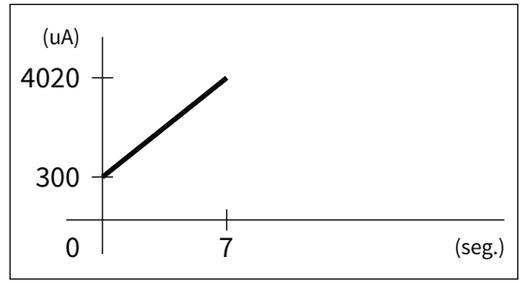


2da parte: Meseta, se mantiene la intensidad máxima constante durante el tiempo seleccionado.

Siguiendo con el ejemplo anterior, la intensidad máxima es de 4020uA y establezco un tiempo de meseta de 10 segundos.

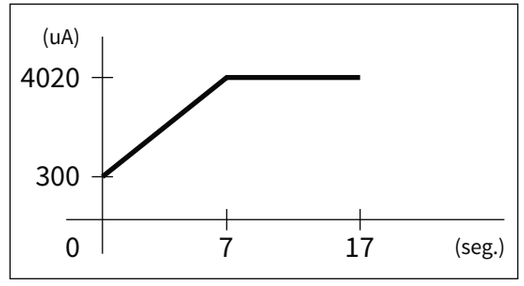

3ra parte: Rampa de descenso, la intensidad inicial es la corriente de meseta ya establecida y la intensidad final será la misma que la corriente inicial de la rampa de ascenso y su tiempo tambien es configurable.

Siguiendo con el ejemplo anterior, la intensidad inicial es de 4020uA, la intensidad final es de 300uA y el tiempo de 6 segundos.

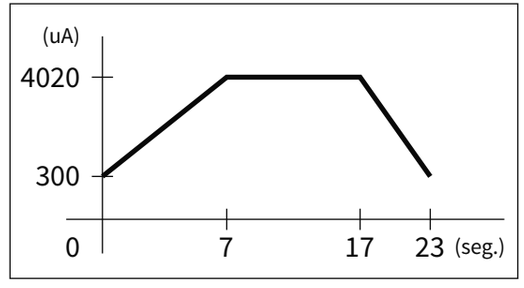


03 » EFECTOS / BENEFICIOS

Tanto la reacción electroquímica como la electrofísica, originada por el paso de la corriente galvánica a través del tejido, producen un proceso inflamatorio agudo local y la consecuente fagocitosis y reparación del tejido originalmente dañado.

La efectividad es alta (en torno al 80%) respecto a los tratamientos convencionales de fisioterapia (ultrasonido, láser, ondas de choque, etc.) o médicos (fármacos, infiltraciones con Cáusticos ó cirugía).

La incidencia de recaídas es muy baja.

04 » EQUIPO

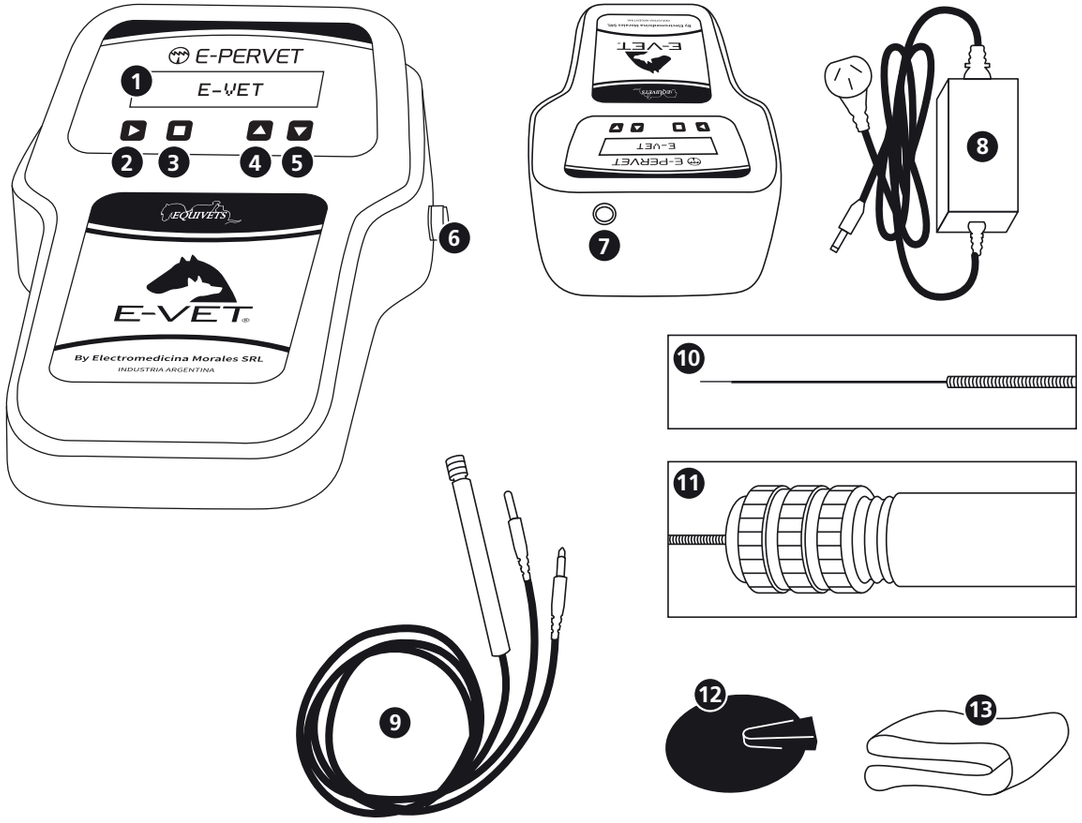

1- Display.
2- Inicio.
3- Cancelar.
4- Subir.
5- Bajar.
6- Entrada de carga.
7- Salida.
8- Cargador.
9- Cable porta aguja.
10- Aguja.
11- Mandril.
12- Electrodo.
13- Banda elástica.

05 » USO

Prepare la zona a tratar de la siguiente manera:
- Rasure la zona.
- Higienice y desinfecte la zona.

Conecte el cable porta-aguja a la salida del **E-PERVET** y al electrodo.
Presione la tecla ***Inicio*** para encender el mismo.
Se observarán las siguientes pantallas de inicio.





Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar el modo de uso ***Manual/Memoria.***





Modo Manual.

Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar el tiempo de la rampa de ascenso.



Tiempo de ascenso: 1 a 60 segundos.
Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar el tiempo de meseta.



Tiempo de meseta: 1 a 60 segundos.
Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar el tiempo de la rampa de descenso.



Tiempo de descenso: 1 a 60 segundos.
Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar la intensidad mínima con la cual comenzará la rampa de ascenso.



Intensidad mínima: 300 a 600uA
Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar la intensidad máxima a la cual llegará la rampa de ascenso y se mantendrá durante toda la meseta.



NOTA: el rango de la intensidad máxima va de los 50uA por encima de la intensidad mínima seleccionada hasta los 5000uA.

Presione la tecla ***Inicio*** para continuar.
Podrá iniciar el tratamiento o guardarlo en memoria. **E-PERVET** cuenta con 10 lugares de almacenamiento para sus tratamientos.
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar cualquiera de las dos opciones.





Coloque el electrodo con producto conductor (gel neutro o gasa humedecida en agua) en la zona a tratar (zona rasurada e higienizada), con una separación de no mas de 20 cm de la inserción de la aguja. Sujete el electrodo por medio de la banda elástica proporcionada por E-VET.


Inicio del tratamiento:
Coloque la aguja en el porta-aguja.
Presione la tecla ***Inicio*** para confirmar el comienzo del tratamiento.



El **E-PERVET** indicará en pantalla y con una alerta sonora que se encuentra en la espera de comenzar el tratamiento, hasta que la aguja ingrese al paciente.



Luego mostrará en pantalla los siguientes datos:
Cuenta regresiva del tiempo e incremento de la intensidad de la rampa de ascenso. Mientras tanto el **E-PERVET** emitirá una alarma sonora cuya frecuencia aumentará a medida que se acerque al final de la rampa de ascenso.

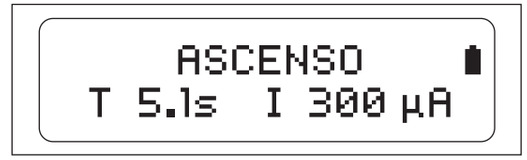

Cuenta regresiva del tiempo de la meseta.
Mientras tanto el **E-PERVET** emitirá una alarma sonora para indicar dicho estado de emisión.



Cuente regresiva del tiempo y disminución de la intensidad de la rampa de descenso. Mientras tanto el **E-PERVET** emitirá una alarma sonora cuya frecuencia aumentará a medida que se acerque al final de la rampa de descenso.



Una vez finalizado el tratamiento el **E-PERVET** indica tanto en pantalla, como con una alerta sonora que queda a la espera de la extracción de la aguja.



Nota: Tanto en la espera de la Inserción como en la Extracción el equipo queda emitiendo a la intensidad mínima seleccionada.

Grabar en memoria:
Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar en qué lugar de las 10 memorias desea guardar el programa.
Presione la tecla ***Inicio*** para confirmar.



Coloque la aguja en el porta-aguja. (ver apartado)

Una vez guardado el programa presione las teclas ***Subir/Bajar*** para seleccionar iniciar tratamiento y presione la tecla ***Inicio*** para comenzar.

Modo Memoria.

Presione las teclas ***Subir/Bajar*** para buscar la memoria deseada.



En pantalla se muestra:
Nº de memoria.
Tiempo de ascenso.
Tiempo de meseta.
Tiempo de descenso.
Intensidad mínima.
Intensidad máxima.
Presione la tecla ***Inicio*** para confirmar.
Presione nuevamente la tecla ***Inicio*** para comenzar el programa.

Una vez finalizado el programa se observará en pantalla la siguiente leyenda.



NOTA: E-PERVET siempre guarda en su configuración inicial el último programa utilizado.

Ahorro de energía.

E-PERVET posee un “Modo de ahorro de energía” para aprovechar al máximo la carga de la batería. Este modo se activa automáticamente cuando el equipo este encendido y no está siendo utilizado por más de 20 segundos, ni emitiendo. Al activarse este modo, baja la intensidad lumínica de la pantalla, volviendo a su estado normal al presionar cualquier tecla.


Nivel de batería.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el indicador de carga de la batería.



Posee 4 niveles indicativos de carga.

Una vez que llega al mínimo la carga de la batería, el indicador comienza a parpadear próximo a apagarse el **E-PERVET**.

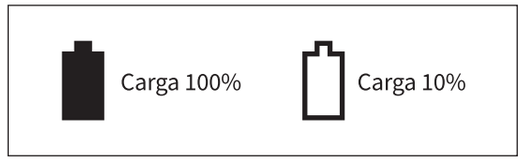

E-VET®

Carga de batería.

Conecte el cargador provisto por **E-VET** a la red de 220/110V con puesta a tierra y luego conéctelo al equipo. Una vez que el equipo este conectado al cargador el mismo no podrá ser utilizado.
La carga completa es de aproximadamente de 4 horas. Una vez conectado el **E-PERVET** al cargador el mismo mostrará en pantalla el estado de dicha carga.



Al completarse la carga se muestra la siguiente leyenda en pantalla.

Desconecte el cargador de la red de 220/110V y luego del equipo.




NOTA: mientras el **E-PERVET** se esté cargando no podrá ser utilizado, ni se podrá apagar.

ATENCIÓN: Para prolongar la vida útil de la batería del equipo, se recomienda que después de su uso se coloque a cargar. Nunca dejar que la batería se descargue completamente. En el caso que el equipo no sea usado por un tiempo prolongado, es recomendable que la carga de la batería este a un 50% .


ATENCIÓN: La batería de litio que posee el equipo, solo puede ser reemplazada por personal del servicio técnico autorizado de Electromedicina Morales SRL.

Cómo colocar la aguja en el porta-agujas.

Gire el mandril en sentido de las agujas del reloj hasta dejarlo suelto.
Saque del blíster la aguja de acupuntura, sin sacar el protector de la misma.
Corte el rulo metálico del extremo.

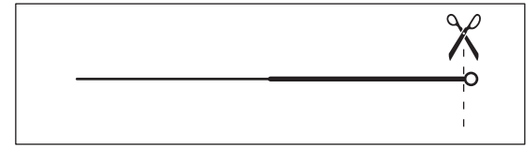

Inserte la aguja en el porta-aguja.
Ajuste el mandril en sentido anti-horario, hasta que quede firme la aguja.

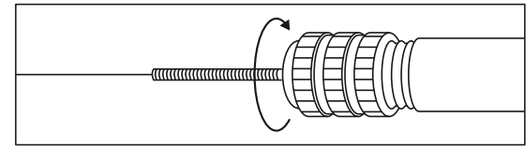

Apagado del equipo.

Para apagar el **E-PERVET** presione la tecla ***Cancelar*** durante 10 segundos. Si el equipo no es usado durante más de 30 minutos el mismo se apagará de forma automática, para evitar el consumo innecesario.

06 » TRATAMIENTO

La técnica de **E-PERVET** está destinada principalmente a la reparación tisular de patologías crónicas como ser tendinosis crónicas, entesopatías, bursitis crónicas. También se ha descripto la efectividad en procesos agudos con el fin de reabsorber el edema producido en el área.

07 » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

ATENCIÓN:
Apague y desconecte siempre el equipo de la red antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

ATENCIÓN:
Una vez concluída la vida util del equipo y sus accesorios, reciclarlo en base a las normas ambientales vigentes en su región. No desecharlo con la basura doméstica.



• Limpiar la carcasa con un paño humedecido en agua, evitando así el depósito de polvo y/u otros agentes atmosféricos.

• Tener en cuenta que éste equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.

• No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás, thinner o símil.

• Las agujas son consumible descartables, no se pueden reutilizar.

08 » CONTRAINDICACIONES

Absolutas: (en ninguno de estos casos debe aplicarse **E-PERVET**)
• Endoprótesis y osteosíntesis.
• Cardiopatías.
• Preñez.
• Procesos oncológicos.
• Tromboflebitis.
• Glándulas endocrinas.
• Afecciones cutáneas y neurosensitivas.

Relativas: (su uso disminuye la efectividad de la técnica)
• Antiinflamatorios sistémicos o locales (corticoides, AINES).
• Aplicación de frío local (duchas, geles, hielo).

09 » ADVERTENCIAS

Antes de tratar a un paciente, lea atentamente el manual de usuario.
Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo, capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.
El mal uso de la técnica puede producir quemaduras en varios grados, reacción inflamatoria, ruptura de fibras ligamentosas y/o tendinosas, dolor.
Mantenga éste equipo fuera del alcance de los niños.
El paciente siempre tiene que estar a la vista del profesional.
No tape las rejillas de ventilación, manténgalas siempre libres para asegurar el buen funcionamiento del equipo.
Tener en cuenta que éste equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.
Nunca inserte objetos de ningún tipo a través de las distintas aberturas de respiración, ventilación y salidas que la unidad de comando posee.
Ante cualquier caída del equipo, diríjase al servicio técnico para ser controlado. No trate de utilizarlo sin previo control.
El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implantados es contraindicado.
Procure un buen cuidado de los distintos accesorios (cables) y su higiene.
Dependiendo de la zona a tratar, retirar todos los aparatos eléctricos y objetos metálicos del paciente, antes de iniciar el tratamiento.
La operación del equipo en cercanías (menos de un metro) a un aparato de terapias por ondas cortas o microondas, puede alterar la señal de salida y los indicadores de funcionamiento.
Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, este equipo solo debe ser conectado a una red de alimentación con tierra de protección.
El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. Cualquier desperfecto o falla consulte con el representante autorizado.
El cable de alimentación solo debe ser reemplazado por personal del servicio técnico autorizado.
Utilice solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. Manéjelos con cuidado, un uso inapropiado puede causar rotura en los mismos.
La batería de litio que posee el equipo, solo puede ser reemplazada por personal del servicio técnico autorizado de Electromedicina Morales SRL.
No debe ingresar en el equipo ningún tipo de material ni líquido externo.
Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo a las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia
particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor (aparato afectado), aumente la distancia entre equipos, conecte el equipo en un toma distinto del que está conectado los otros equipos o consulte con el servicio técnico.


10 » ACCESORIOS

• Agujas - ACC_229
• Electrodo - ACC_018
• Porta-aguja - ACC_300
• Banda elástica - ACC_059
• Bolso - ACC_232
• Manual/Garantía
• Cargador - VAR_356

11 » DATOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamiento (ºC)	0 A 40
Humedad de funcionamiento (%)	0 A 70
Salidas	1
Temporizador (segundos)	1 A 60
Intensidad inicial de rampa (uA)	300 A 600
Intensidad de meseta (uA)	350 a 5000
Consumo (Watt)	0.5
Cargador de batería	100-240V 50-60hZ / 12VCC 1A
Autonomía	Superior a 12 hs. de uso contínuo
Memorias	10
Batería	Litio-Ion 7.4V 850mAh
Peso de la unidad de control (Kg)	0,35
Peso cargador (Kg)	0,10
Peso total (Kg)	2
Gabinete	Alto Impacto, apto para uso hospitalario o consultorio
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Medidas

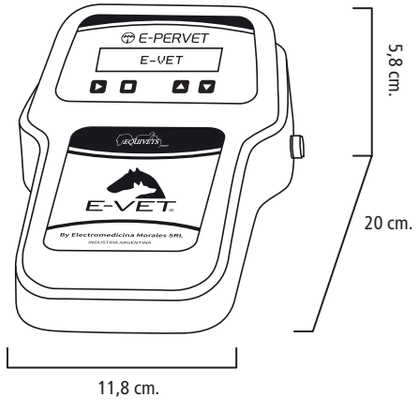

12 » SIMBOLOGÍA

Tierra protectora	**Límites de temperatura**
Parte aplicable Tipo B	**Fragil**
Radiación no ionizante	**Este lado arriba**
Atención, consulte documentación	**Límites de humedad**
Fecha de fabricación	**No apilar más de 5 bultos**
Encendido	**Proteger de la humedad**
Apagado	

13 » CONTROL DE ENTREGA

- ☐ **Equipo.**
- ☐ **Cargador.**
- ☐ **Bolso.**
- ☐ **Agujas.**
- ☐ **Electrodo.**
- ☐ **Banda elástica.**
- ☐ **Porta-Aguja.**
- ☐ **Manual/Garantía.**

14 » GARANTÍA

Terminos de la Garantía.

Electromedicina Morales S.R.L.® garantiza el normal funcionamiento de este producto por un período de dos (2) años desde la fecha de entrega en sus propios locales de venta o por un distribuidor autorizado, considerándose como fecha de entrega, la registrada en la factura o ticket de compra entregado al comprador original.

Esta garantía está limitada al comprador original y no puede ser reasignada o transferida. Quedan excluídos de esta garantía los materiales cuyo deterioro sea normal, como los accesorios, fusibles y partes descartables. Electromedicina Morales S.R.L.® se obliga exclusiva y únicamente a reparar o reemplazar cualquier elemento que se considere defectuoso por razones de fallas en los materiales o durante la fabricación. Electromedicina Morales S.R.L.® se reserva el derecho de determinar la existencia o inexistencia de algún defecto.

Todo reclamo durante el período de vigencia de la garantía deberá ser realizado por escrito a Electromedicina Morales S.R.L.®. El envío del producto en garantía deberá ser coordinado previamente con la empresa para evitar cualquier tipo de riesgo durante su transporte, sobre todo, cuando éste no sea realizado por Electromedicina Morales S.R.L.® y el mismo estuviese a cargo de un tercero. **Pérdida de la garantía:** en caso que el producto haya sido dañado por accidente y/o maltrato o haya sido dañado por uso abusivo o uso negligente en la operación y/o manipulación y/o mantenimiento del mismo, se produce automáticamente la pérdida de la garantía. La reparación y/o modificación del producto por personas no autorizadas por Electromedicina Morales S.R.L.®, como la alteración y/o remoción del número de serie del producto, genera la pérdida automática de la garantía.

Si cualquiera de las partes y/o accesorios del aparato no ha/n sido conectados y/o instalados y/o ajustados en concordancia con las instrucciones descriptas en el manual de uso provisto por la empresa, se produce en forma automática la pérdida de la garantía.

ESTA GARANTÍA CONTIENE TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.® NO EXISTIENDO OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O EN ESTATUTOS. LOS COMPRADORES ACEPTAN ASUMIR TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO, LESIONES CORPORALES O MUERTE QUE PUEDA RESULTAR POR EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO Y/O POR LA UTILIZACIÓN Y/O MANIPULACIÓN POR PERSONAL NO CAPACITADO O POR MALTRATO DEL APARATO Y/O SUS ACCESORIOS POR EL COMPRADOR, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES O CLIENTES. ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.® NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑO DIRECTO O/Y INDIRECTO DE NINGÚN TIPO. ESTA GARANTÍA NO PODRÁ SER MODIFICADA DE NINGUNA FORMA SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.®".

La información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, Electromedicina Morales S.R.L. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes. Una vez concluida la vida útil del equipo (estimada en 5 años) Electromedicina Morales S.R.L.® no se responsabiliza por las consecuencias de defectos eventuales del producto.

Formulario Nº: MU67 REV. 06

E-VET®

Tarjeta de activación de Garantía.

Remitir a Electromedicina Morales por correo o e-mail.

Nombre del usuario: ..... **Fecha:** .....

Institución: .....

Domicilio: ..... **Código Postal:** .....

Localidad: ..... **País:** .....

Teléfono: ..... **Fax:** .....

E-mail: .....

Modelo: ..... **Serie Nro:** .....

Distribuidor o Representante: .....

Ayúdenos a mejorar la calidad de nuestros productos enviando sus sugerencias y/o comentarios:

.....

.....

15 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO

ELECTROMEDICINA MORALES

E-mail: info@electromedicinamorales.com

Web: www.electromedicinamorales.com

www.facebook.com/electromedicinamorales

www.twitter.com/emorales_online

www.youtube.com/electromorales

ISO 9001 SGS — ANMAT Autorización Funcionamiento de Empresa — BPF ANMAT 12306/11-7

SUCURSAL RIVADAVIA
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

SUCURSAL VIAMONTE:
Viamonte 2250 (C1056ABJ), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4951-9168

SERVICIO TÉCNICO
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

16 » NOTAS